



EV-04

Sistema de alarme móvel pessoal

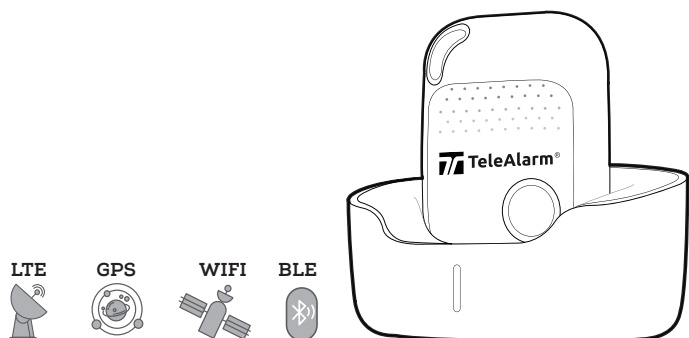

Introduzir o cartão SIM


O cartão SIM não está incluído na embalagem. O usuário pode comprar um cartão nano SIM do seu operador local.

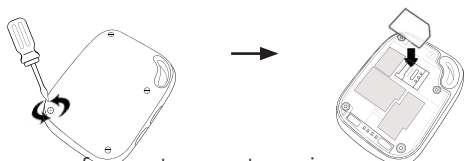

- Desaparafuse a tampa traseira e remova-a.
- Antes de introduzir o cartão SIM, certifique-se de que o mesmo tem crédito.
- Volte a colocar a tampa e aperte os parafusos.

TIP Antes de instalar o cartão SIM, verifique se o cartão SIM tem código PIN ou não, se tiver, utilize um telemóvel para remover o código PIN do cartão.

Carregar o seu dispositivo

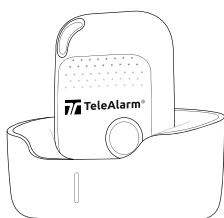


- Coloque o dispositivo na base de carregamento.
- Ligue o cabo USB da base de carregamento ao adaptador CA.

A luz da base de carregamento pisca ao carregar e tornar-se-á fixa quando completamente carregada.


TIP Na primeira utilização, carregue a bateria completamente, durante cerca de 2~3 horas.

TIP Quando o nível de bateria ficar abaixo de 20% envia uma mensagem de aviso de bateria fraca para a pessoa indicada na lista de contactos por SMS ou APP.


Apresentação do seu dispositivo

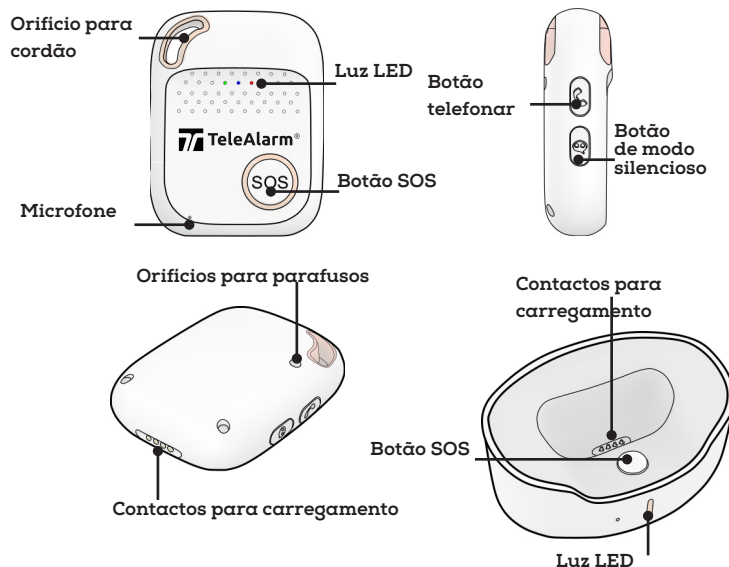

Ligar e desligar o dispositivo

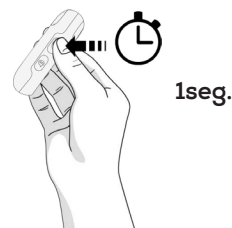

Para ligar o dispositivo: Premir o botão TELEFONAR durante 1 segundo, todos os LED irão piscar rapidamente. O dispositivo também pode ser ligado automaticamente colocando-o na estação de carregamento.

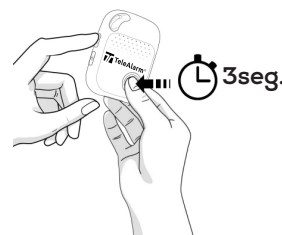

- Para desligar o dispositivo: Mantenha premido o botão TELEFONAR e o botão SOS durante 3 segundos até que os LED se apaguem.


Botão de modo silencioso

- Clique duas vezes neste botão para desligar os avisos de voz, clique duas vezes novamente no botão para ligar os avisos de voz.

Obter uma posição GPS

- Para obter pela primeira vez a posição do GPS, utilize-o no exterior ou perto de uma janela para que o dispositivo possa obter uma posição correcta, através dos satélites. Isto pode demorar alguns minutos, de acordo com o seu ambiente.

Ativar um alarme SOS

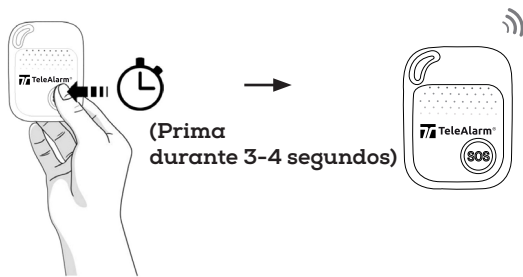

Se necessitar de ajuda, prima o botão SOS durante 3-4 segundos, até ouvir o aviso de voz da ativação do alarme SOS. Isto inicia a sequência das mensagens de texto "ajudem-me!" enviadas para os seus números de contacto de emergência, seguidas pelas respectivas chamadas de emergência.


- Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação com o primeiro número, tentará o segundo número após 10 segundos. Caso o segundo número também não atenda, o sistema ligar-se-á ao terceiro número, etc.
- Entre cada chamada, haverá um atraso de 10 segundos, durante este período, o utilizador pode parar a sequência de chamadas ou evitar um possível falso alarme, ao premir o botão SOS. O destinatário da chamada pode também parar a sequência de chamadas premindo 1, no seu telemóvel, durante a conversa nos dois sentidos.
- Utilize os botões laterais +/- para ajustar o volume de som durante uma chamada.

Não se esqueça de programar números de contacto de emergência. Não é obrigatório definir todos os dez números autorizados, contudo deve ser definido sempre um, no mínimo.


TIP

Seja paciente durante a sequência de chamadas. Pode haver pequenos atrasos, à medida que o alarme contacta telefones que possam estar fora de alcance ou seja direcionado para caixas de atendimento de mensagens.

Fazer uma chamada telefónica

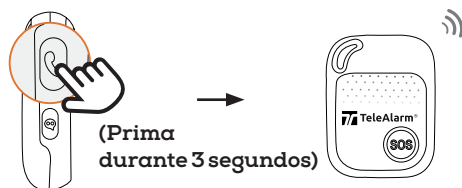

- Para fazer uma chamada, prima o botão TELEFONAR durante 3 segundos e ouvirá um sinal sonoro e, em seguida, marcará o número definido.

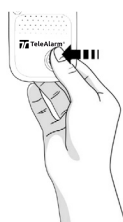

- Para terminar a chamada, prima o botão SOS.

O que significam as luzes?

Indicador de sinal de rede móvel - verde

Verde	A luz mostra um único flash rapidamente a cada 3 segundos	A luz mostra um flash duplo rapidamente a cada 3 segundos
Significa	O dispositivo tem um sinal de rede móvel estável	O dispositivo está registado na rede móvel

Indicador de posicionamento - azul

Azul	A luz mostra um único flash rapidamente a cada 3 segundos	A luz mostra um flash duplo rapidamente a cada 3 segundos	Luz desligada
Significa	O dispositivo não tem a última posição de localização	O dispositivo tem a última posição de localização	O dispositivo não está a corrigir a última localização

Indicador de posicionamento - vermelho

Vermelho	Vermelho LIGADO (fixo)	O vermelho mostra um flash duplo rapidamente a cada 3 segundos
Estado	O dispositivo foi totalmente carregado	BLE ligado

Vermelho	Vermelho intermitente rápido	Vermelho desligado ou intermitente lento
Estado	A potência da bateria é inferior a 20%	O dispositivo está a carregar

Atenção:

Cumpra as instruções para prolongar a vida útil da unidade.

- Não utilize nem armazene a unidade em locais poeirentos.
- Não coloque a unidade em locais sobreaquecidos ou sobreaquecidos.
- Limpe a unidade com um pano seco.
- Não limpe com produtos químicos, detergente.

Aviso: Manter o dispositivo a pelo menos 25 cm de distância de um pacemaker.

Aviso: mantenha o IMEI e o SIM confidenciais, caso contrário a sua privacidade pode ser exposta.