

Visão Geral

O TxGo alarga a capacidade de acionar uma chamada de emergência fora de casa, para além do alcance do Carephone. Permite que os utilizadores peçam ajuda de qualquer lugar, desde que o seu telemóvel ligado à internet esteja dentro do alcance.

Utilizando a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), o TxGo garante uma longa duração da bateria. Pode ser utilizado com qualquer dispositivo Carephone da série TA74 e pode ser emparelhado com telemóveis Android e iOS.

PIN e código de acesso

Ao emparelhar o TxGo com a sua aplicação móvel, ser-lhe-á pedido que insira um código PIN. Um código de acesso também é necessário para modificar as definições da aplicação.

PIN e código de acesso: 008946

Por motivos de segurança, não é recomendável partilhar este código com os utilizadores finais.

Indicador LED no TxGo

Inicialização

No arranque, o comportamento do LED do TxGo é o seguinte:

- O LED muda de vermelho para verde e depois para azul.
- De seguida, o LED pisca em turquesa durante cerca de 4 segundos.
- Por fim, a luz verde acende brevemente e, em seguida, o LED apaga-se.

Modo de emparelhamento

Para emparelhar o TxGo com a aplicação móvel, abra a aplicação e siga as instruções no ecrã.

Quando o modo de emparelhamento estiver ativado, o LED ficará azul. Se o emparelhamento for bem-sucedido, o LED piscará três vezes a verde e, se o emparelhamento falhar, piscará três vezes a vermelho. Note que tem 90 segundos para completar o processo de emparelhamento. Após este tempo, o TxGo sairá automaticamente do modo de emparelhamento e o LED apagar-se-á.

Modo normal

Ao premir o botão, este pisca a vermelho uma vez. Em seguida, pisca a verde para confirmar que o alarme foi enviado.

Registro del TxGo

Para registar o TxGo no seu TA74, utilize o número de série na parte traseira do seu TxGo. É necessário

utilizar o Software Configuration Manager ou a plataforma Cloud Services.

⚠ O menu de manutenção da unidade TA74 não permite o registo de dispositivos TxGo.

Configuração do aplicativo




TxGo assistant

Welcome to the TxGo setup wizard. The TxGo is configured in the following steps.




Emparelhamento com a aplicação

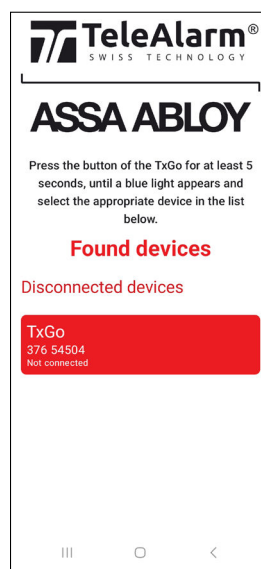

Para emparelhar o TxGo com a aplicação, pressione e mantenha pressionado o botão durante mais de 5 segundos para o colocar em modo de emparelhamento. Em seguida, clique no dispositivo detetado. Se for solicitado um código PIN, consulte a secção dedicada no início deste manual. Por fim, clique novamente no botão do TxGo para confirmar o emparelhamento.


Se já estiver emparelhado, o modo de emparelhamento será bloqueado.

Deve reiniciar o TxGo removendo a bateria e recolando-a. Após a reinicialização, terá 15 minutos para emparelhar o dispositivo. Após este tempo, o modo de emparelhamento será novamente bloqueado.

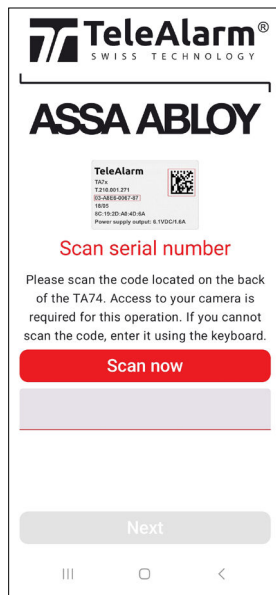


Para atribuir o TxGo ao seu TA74, pode digitalizar o código QR na parte de trás do TA74 tocando no botão [Scan now](#) ou introduzir manualmente o número de série tocando no campo correspondente. De seguida, toque no botão [Next](#).

Número de telefone

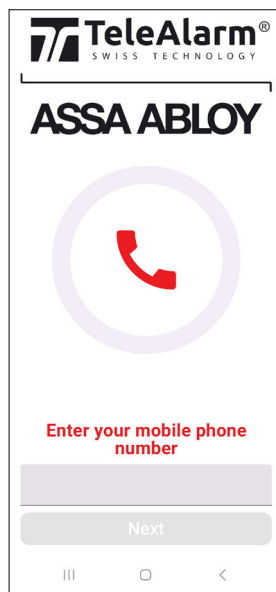


Introduza o seu número de telemóvel e toque em [Next](#).

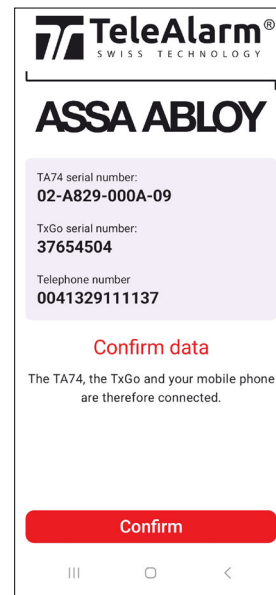

Verifique os parâmetros e toque no botão [Confirm](#). Em seguida, toque no botão [Start](#). Para configurar completamente a aplicação, terá de adicionar pelo menos um destinatário. Para tal, aceda à página [Settings](#) da aplicação (consulte a secção [Menu](#) e [Configurações](#)).

Botão de emergência

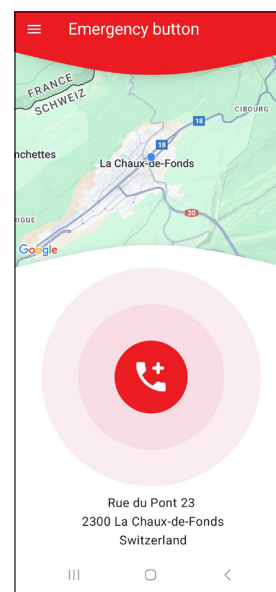

Esta é a página principal da aplicação. Um alarme pode ser acionado tocando no botão de emergência (botão vermelho no centro do ecrã) na aplicação ou premindo o botão do dispositivo TxGo. As chamadas de emergência acionadas acidentalmente podem ser canceladas no prazo de 8 segundos, se ativadas na aplicação, ou no prazo de 21 segundos, se ativadas no TxGo, tocando novamente no botão de chamada de emergência.

Menu



Para aceder ao Menu, toque nas três barras no canto superior da aplicação.


To the Emergency button

Toque neste campo para aceder à página do [Botão de emergência](#).

Settings

Se as definições tiverem de ser ajustadas, toque neste campo. Ser-lhe-á pedido que introduza o código de acesso (consulte a secção dedicada no início deste manual). Após inserir o código com sucesso, será direcionado para a página de [Configurações](#).

Configurações

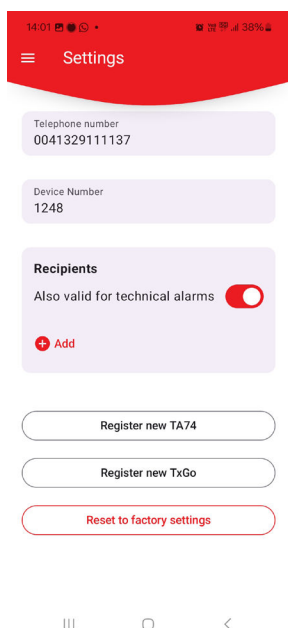

Telephone number

Introduza o número de telefone do cartão SIM utilizado. Este número será utilizado pela central de receção de alarmes para estabelecer a comunicação de voz durante uma chamada de emergência.

Device number

Defina o número do dispositivo que deve ser transmitido à central de receção de alarmes em caso de chamada de emergência.

Recipients

Clique em [Add](#) para adicionar um novo destinatário. Se desativar a opção [Also valid for technical alarms](#), terá uma segunda lista de destinatários para preencher.

Technical recipients

Se tiver desativado a opção [Also valid for technical alarms](#), pode introduzir um novo destinatário para este tipo de alarme clicando em [Add](#).

Register new TA74

Toque neste botão para abrir a página de registo de um novo Carephone para a sua aplicação.


Register new TxGo

Toque neste botão para registar um novo TxGo ou desemparelhar um dispositivo. Se pretende interromper a ligação Bluetooth entre o TxGo e a aplicação, basta tocar no TxGo ligado. Quando o TxGo já não for necessário, é recomendável removê-lo das definições Bluetooth do seu telefone.

Reset to factory settings

Toque neste botão para repor todos os parâmetros da sua aplicação.

Adicionar um destinatário

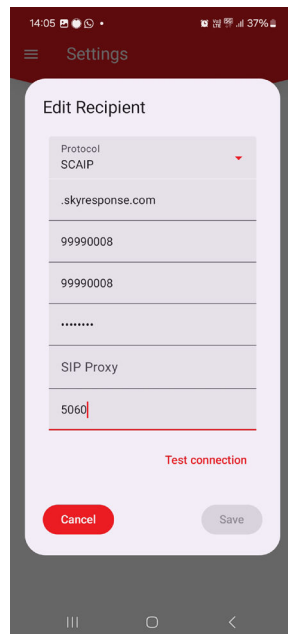

Protocol

Selecione o tipo de protocolo a utilizar de acordo com o pré-requisito da central recetora de alarmes:

- SCAIP callback
- TS50134-9 callback

 A aplicação móvel suporta apenas um ARC com retorno de chamada.

Recipient

Introduza o endereço SIP de destino da central recetora de alarmes.

SIP User name

Introduza o nome de utilizador da conta SIP.

SIP authentication name

Introduza o nome de autenticação do utilizador da conta SIP.

SIP Password

Introduza a palavra-passe de autenticação da conta SIP.

SIP Proxy

Introduza o endereço proxy do servidor SIP.

SIP Proxy Port

Introduza a porta do endereço proxy do servidor SIP.

Test connection

Inicie uma chamada de teste com a central receptora de alarmes. É necessário fazer uma chamada de teste para validar o destinatário.

Notifications

O alarme acionado ao pressionar o botão de alarme é apresentado no ecrã de bloqueio do telemóvel.

Se a aplicação for fechada, será apresentada uma notificação no telemóvel solicitando que o utilizador reabra a aplicação para permitir a transmissão de alarmes.

Aviso importante

- Para ativar a aplicação móvel, o TA74 deve estar registado nos Serviços Cloud da TeleAlarm.
- No máximo duas aplicações móveis podem ser registadas por TA74.
- Um teste destas definições deve ser realizado com cada utilizador por pessoal treinado.
- Para que o TxGo funcione corretamente, devem ser cumpridas as seguintes condições:
 - telemóvel deve estar ligado e com a bateria suficientemente carregada.
 - telemóvel deve estar registado na rede celular e ter sinal suficiente para funcionar.
 - telemóvel deve possuir um pacote de telemóvel que permita a transmissão de dados.
 - A capacidade Bluetooth do telemóvel deve estar ativada.
 - telemóvel deve estar dentro do alcance Bluetooth do TxGo.
 - som do telemóvel deve estar ativado e o volume deve estar suficientemente alto para ser ouvido pelo utilizador final.
 - A aplicação TxGo deve estar instalada, configurada e permanecer sempre em funcionamento.
- A aplicação transmite constantemente coordenadas GPS sempre que um alarme é acionado, o que resulta num consumo extra de bateria do telemóvel.
- A bateria do seu dispositivo TxGo deve ser substituída assim que a aplicação indicar o nível de bateria baixo.
- Instale sempre a versão mais recente da App Store ou do Google Play.
- Para emparelhar novamente o TxGo, retire e volte a inserir a bateria. Em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão durante 5 segundos para acionar o emparelhamento Bluetooth.